

Movymia[®] Pen

Instructions d'utilisation



Notre Mission - Votre Santé



Ce carnet de suivi appartient à

Nom, prénom

Téléphone

Contact Médecin

Téléphone



Tout le traitement



Tout le
traitement
1 seul stylo

Chaque jour
Aiguille
et injection

Tous les
28 jours
Changement
et amorçage

Utilisation et conservation



Lors du démarrage de votre traitement, un stylo injecteur Movymia® Pen et une cartouche doivent vous être remis.

Le stylo s'utilise tout au long du traitement.

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin.



Triangle

Position de départ



Flèche

Position de début
d'injection
(chaque jour)



Gouttelette

Position de début
d'amorçage
(chaque 28 jours)


Ne jamais congeler

Conservez les cartouches et le stylo, avec sa cartouche insérée, au réfrigérateur entre 2°C et 8°C.






Chaque jour

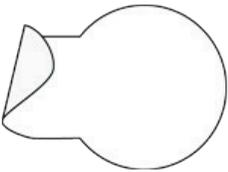

Tout le
traitement
1 seul stylo


Chaque jour
Etape 1 sur 3
**Changer
l'aiguille**

Tous les
28 jours
Changement
et amorçage

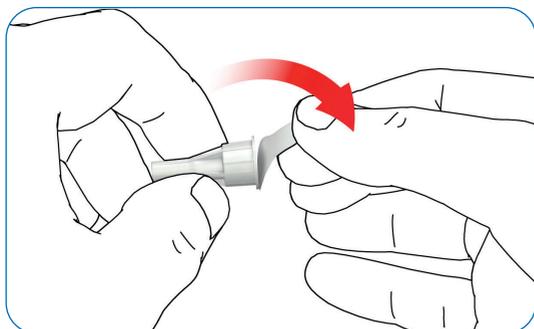


1

Retirez la pellicule protectrice.

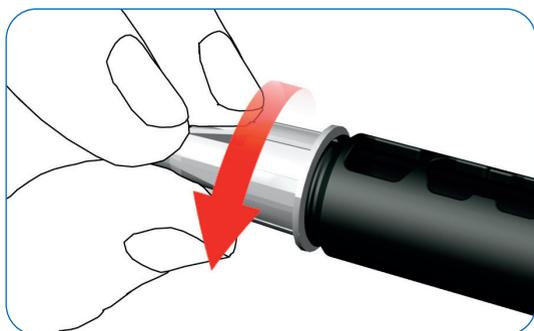


2

Vissez l'aiguille dans le sens des aiguilles d'une montre sur le porte-cartouche. Assurez-vous que l'aiguille est correctement montée et qu'elle repose bien sur le porte-cartouche.

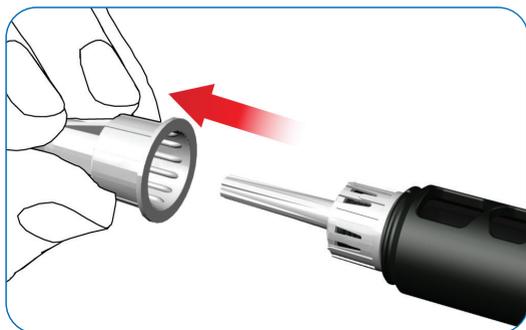

3

Retirez le couvre-aiguille externe et mettez-le de côté.

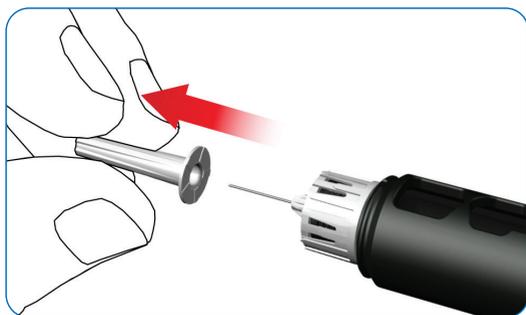


4

Retirez et jetez le couvre-aiguille interne. Lorsque vous montez l'aiguille il est possible que quelques gouttes s'en échappent ; c'est normal.




Chaque jour

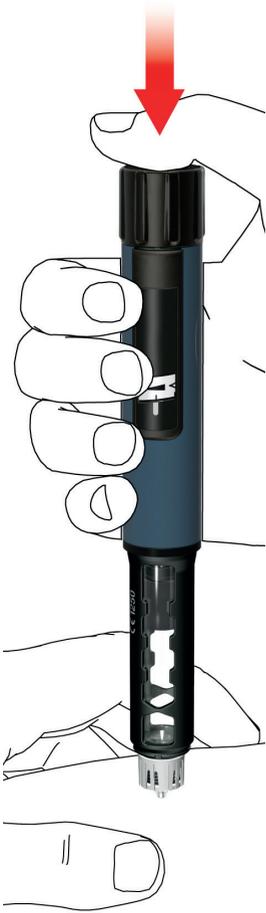

Tout le
traitement
1 seul stylo


Chaque jour
Etape 2 sur 3
**Injecter la
dose**

Tous les
28 jours
Changement
et amorçage

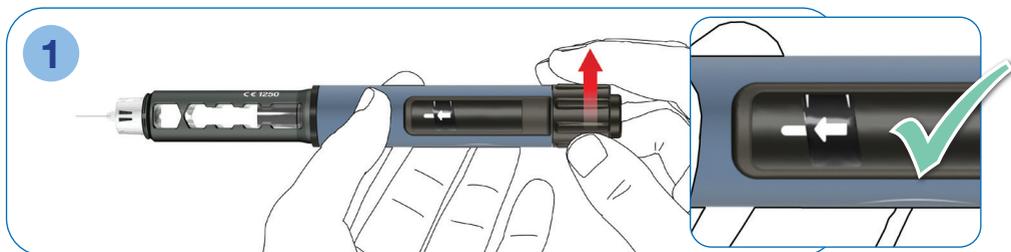


Pour régler la dose quotidienne fixe de 80 microlitres, tournez le bouton-doseur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il s'arrête et que vous ne puissiez plus tourner. Assurez-vous que l'affichage indique le signe d'une flèche et que les deux bandes indicatrices sont alignées. Pendant le réglage de la dose, le stylo produit un cliquetis audible et une résistance est perceptible. N'essayez pas de forcer le bouton-doseur au-delà.

Si la cartouche contient moins de 80 microlitres, le bouton-doseur ne pourra pas être tourné dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au signe de la flèche. Dans ce cas, retirez l'aiguille du stylo, changez de cartouche et poursuivez avec l'amorçage conformément aux étapes de préparation du stylo.

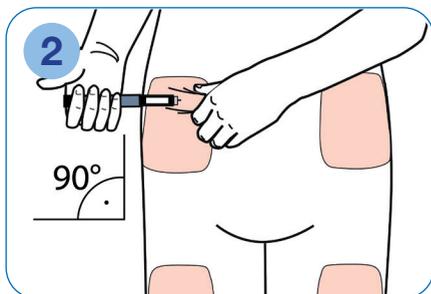

Sélectionnez un site d'injection approprié et préparez votre peau comme recommandé par votre médecin. Pincez délicatement un pli de peau entre le pouce et l'index. Insérez l'aiguille tout droit et délicatement dans la peau comme indiqué dans l'illustration.

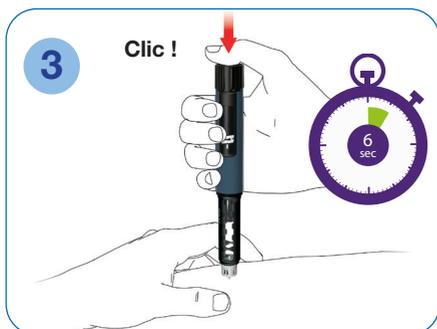


Appuyez sur le bouton-poussoir jusqu'à ce que l'indication de dose soit revenue à la position de départ. Gardez l'aiguille dans le pli de peau pendant 6 secondes de plus.



Retirez lentement le stylo. Vérifiez si l'affichage est en position de départ pour vous assurer que la totalité de la dose a été injectée.




Chaque jour

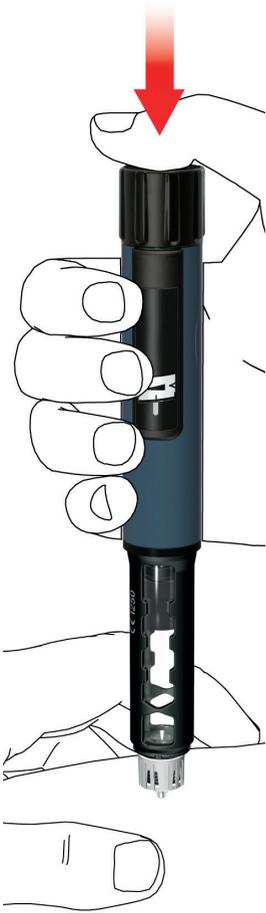

Tout le
traitement
1 seul stylo

Chaque jour
Etape 3 sur 3
**Retirer
l'aiguille**


Tous les
28 jours
**Changement
et amorçage**

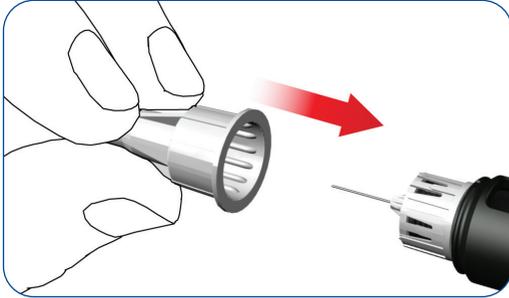

- 1** Montez soigneusement le couvre-aiguille externe sur l'aiguille.




- 2** Vissez le couvre-aiguille dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer l'aiguille du stylo. Jetez-le de manière appropriée, par exemple, dans un récipient pour objets tranchants à l'épreuve des perforations.

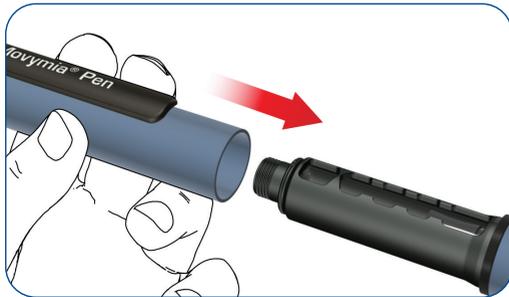

- 3** Remettez en place le capuchon du stylo. Ne retirez pas la cartouche de votre stylo avant qu'elle ne soit vide.




- 4** Remettez le capuchon en place après chaque utilisation. **Ne rangez pas votre stylo avec une aiguille dessus.**

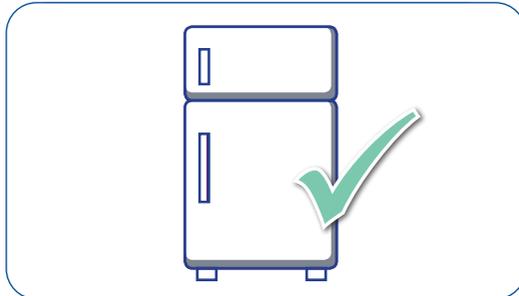

- 5** Replacez le stylo avec la cartouche insérée au réfrigérateur, (**entre 2 et 8 °C**), immédiatement après utilisation.




Tous les 28 jours

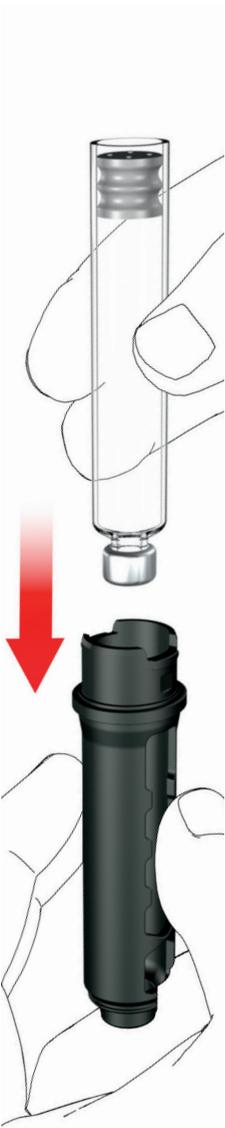


Tout le
traitement
1 seul stylo

Chaque jour
Changer
l'aiguille


Tous les
28 jours
**Changer la
cartouche**

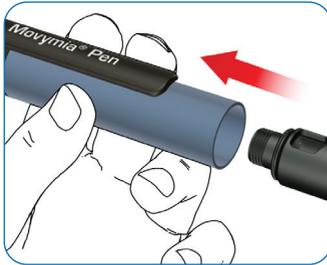

1 Retirez le capuchon du stylo.

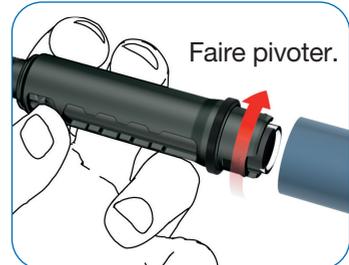


2 Retirez le porte-cartouche

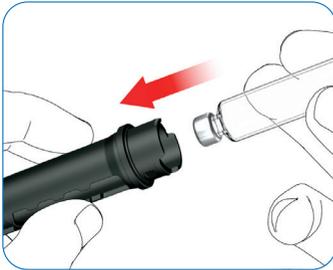

3 Retirez la cartouche vide, changer de cartouche. Insérez une nouvelle cartouche dans le porte-cartouche, en introduisant la capsule métallique sortie de la cartouche en premier.

Inscrivez la date sur la cartouche et sur le calendrier de suivi pp 16-17.

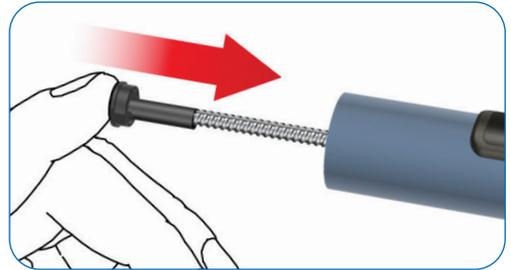

4 Repoussez délicatement la tige filetée avec votre doigt, le long d'une ligne droite et aussi loin que possible. Cela n'est pas nécessaire si la tige filetée est déjà en position de départ, comme lors de la toute première utilisation du stylo. La tige filetée ne peut pas être entièrement repoussée vers le corps du stylo.



5 Montez le porte-cartouche sur le corps du stylo dans lequel la tige a été repoussée en le tournant à 90 degrés, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Fixez l'aiguille comme indiqué dans l'étape «Fixation de l'aiguille».



Tous les 28 jours



Tout le
traitement
1 seul stylo

Chaque jour
Changer
l'aiguille


Chaque
28 jours
**Amorçage
et test**



Note

Ne répétez pas cette étape d'amorçage et de test avant chaque injection quotidienne.

Uniquement à chaque changement de cartouche. Sinon vous n'aurez pas suffisamment de médicament pour une période de 28 jours.

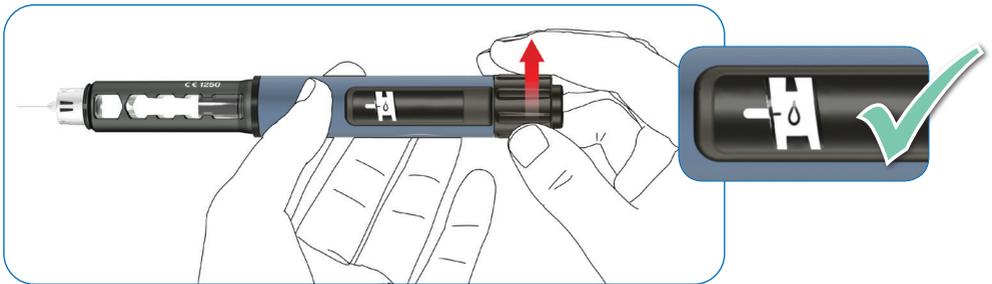

1

Tournez le bouton-doseur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que vous puissiez voir le signe d'une gouttelette sur la fenêtre d'affichage de la dose. Assurez-vous que les deux bandes indicatrices sont alignées. Pendant le réglage de la dose, le stylo produit un cliquetis audible et une résistance est perceptible.




2

Tenez le stylo avec l'aiguille orientée vers le haut.

3

Appuyez à fond sur le bouton-poussoir. Maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'indication de dose soit revenue à la position de départ. Quelques gouttes de médicament doivent sortir de la pointe de l'aiguille. Si aucune goutte n'émerge, répétez les étapes 1 à 3 jusqu'à ce que vous aperceviez quelques gouttes.

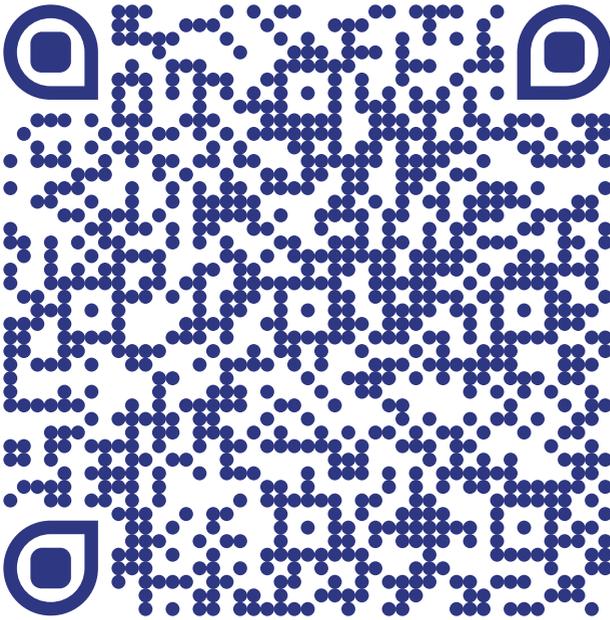

Scannez ce QR code pour
visualiser la vidéo

Movymia® est indiqué chez les
-Traitement de l'ostéoporose
-Traitement de l'ostéomalacie
Chez les femmes ménopausées

12



En cas de prescription, consultez la place dans la stratégie
pour plus d'information sur Movymia®, nous vous invitons à

INDICATION DU MOVYMIA PEN

adultes :

ostéoporose chez les patients à risque élevé de fracture : ostéoporose post ménopausique et ostéoporose masculine, ostéoporose cortisonique chez les femmes et les hommes à risque élevé de fracture recevant une corticothérapie au long cours par voie générale.¹ Chez les femmes ménopausées, une réduction significative de l'incidence des fractures vertébrales et périphérique, mais non des fractures de la hanche, a été démontrée.

¹ Résumé des caractéristiques du produit Movymia®



pour plus d'informations thérapeutiques sur www.has-sante.fr
pour plus de détails, consultez les mentions obligatoires de ce produit.



CARNET DE SUIVI D'UTILIS

1

Inserée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....



2

Inserée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....

3

Inserée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....



4

Inserée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....

5

Inserée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....



6

Inserée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....

7

Inserée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....



8

Inserée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....

9

Inserée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....



10

Inserée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....

SATIATION DES CARTOUCHES

11 Insérée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....



12 Insérée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....

13 Insérée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....



14 Insérée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....

15 Insérée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....





16 Insérée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....

17 Insérée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....



18 Insérée le
...../...../.....
Numéro de lot
.....

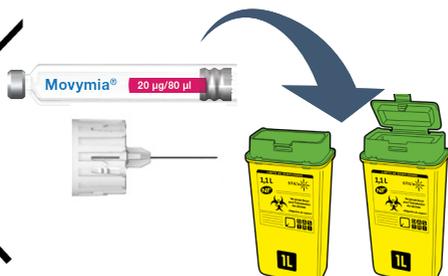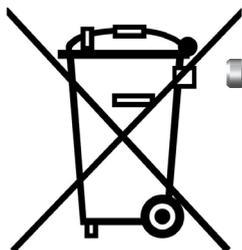



Ce carnet de suivi est prévu pour être remis exclusivement après une prescription par le médecin.

DM 417.1 - 06/2021

EG LABO
9 rue Maurice Mallet
92130 Issy-Les-Moulineaux



Notre Mission - Votre Santé